



LA COLLA IN CIANOACRILATO: UN DISPOSITIVO INDISPENSABILE

Gloria Ortiz Miluy

Team per Accessi Vascolari, Hospital Fundación Jiménez Díaz (Madrid)

Master in Nursing degli Accessi Vascolari

Specialista in Docenza, Ricerca e Gestione delle Aziende Ospedaliere.

Co- fondatrice GruMAV



**Grupo Multidisciplinar de
Acceso Vascular**

www.grumav.es

**I Congresso Nazionale
Madrid, 24-26 maggio
2017**



CIANOACRILATO: cos'è?

E' un adesivo tissutale liquido:
BARRIERA ANTIBATTERICA ad ampio spettro, che garantisce
protezione alla ferita per 7-10 giorni

Disponibile in diversi formati
Disponibile da diverse brand
Disponibile anche colorato



CIANOACRILATO: perché?

- La resistenza tensile superficiale è molto elevata, equiparabile alle suture
 - Il tempo di polimerizzazione è molto ridotto (10-20 sec)
 - L'ampolla di plastica è pronta per essere usata
 - L'ampolla è sterile sia all'interno che all'esterno
 - Ampolla ergonomica and "operator friendly"
- ➡ ✓ **sicurezza della tenuta**
 - ➡ ✓ **rapidità nell'applicazione**
 - ✓ **flessibilità nell'utilizzo**
 - ➡ ✓ **ideale per manovre chirurgiche sterili**
 - ➡ ✓ **semplicità d'uso**

CIANOACRILATO: obiettivo


Chiusura della pelle superficiale di quelle ferite pulite e recenti i cui margini siano facilmente oponibili.

CIANOACRILATO: considerazioni generali dal produttore

- Uso singolo, non usare con diversi pazienti
- Non applicare su organi interni, vasi sanguigni, tessuto nervoso o membrane mucose
- Non applicare su ferite croniche o infette
- Non usare su pazienti con sensibilità conosciuta al cianoacrillato o formaldeide
- Non usare su superficie di flessione/estensione
- Evitare contatto con gli occhi

CIANOACRILATO: obiettivo negli accesso vascolari

- Migliorare la sicurezza e comfort del paziente:
 - Evitando sanguinamento
 - Riducendo manipolazioni
- Facilitare il controllo dell'emergenza cutanea
- Migliorare i risultati estetici

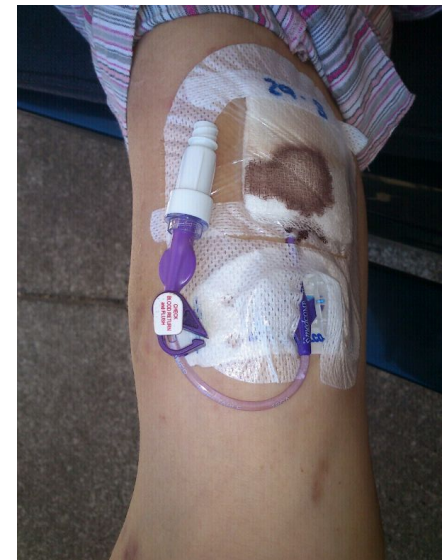

CIANOACRILATO: indicazioni per accessi vascolari

PERFETTO PER FERITE SUPERFICIALI!


Linee CICC/PICC



CIANOACRILATO: indicazioni per accessi vascolari

PERFETTO PER FERITE SUPERFICIALI!

Sistemi impiantati (braccio o torace)

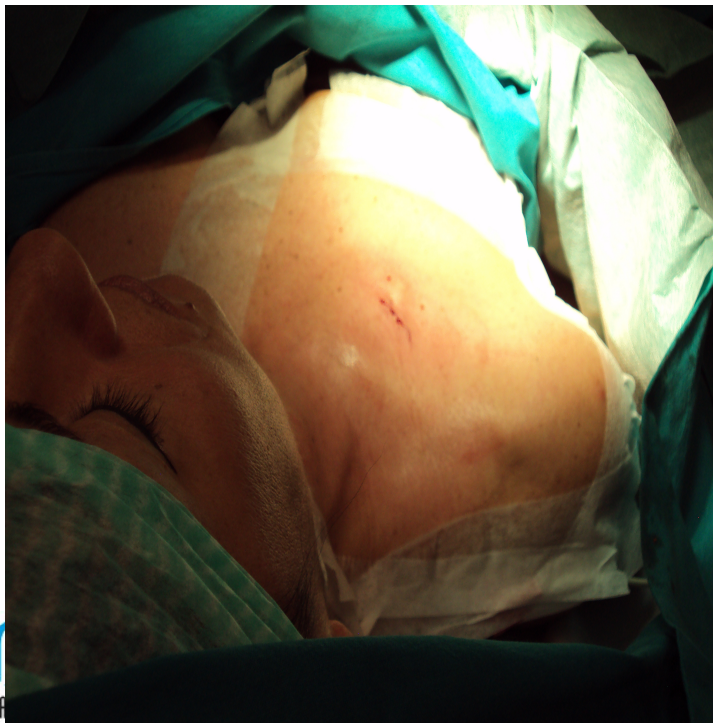

CIANOACRILATO: indicazioni per accessi vascolari

PERFETTO PER FERITE SUPERFICIALI!

Linee tunnelizzate



CIANOACRILATO: indicazioni per accessi vascolari

PERFETTO PER FERITE SUPERFICIALI!


Rimozione CICC/PICC



CIANOACRILATO: indicazioni per accessi vascolari

PERFETTO PER ULTERIORE STABILIZZAZIONE DEL CATETERE

- Applicato sterilmente ad ogni medicazione
- L'applicazione non esime dall'uso di sutureless device
- PICC/CICC/PIVC
- OBIETTIVO: stabilizzare (non evitare sanguinamento)

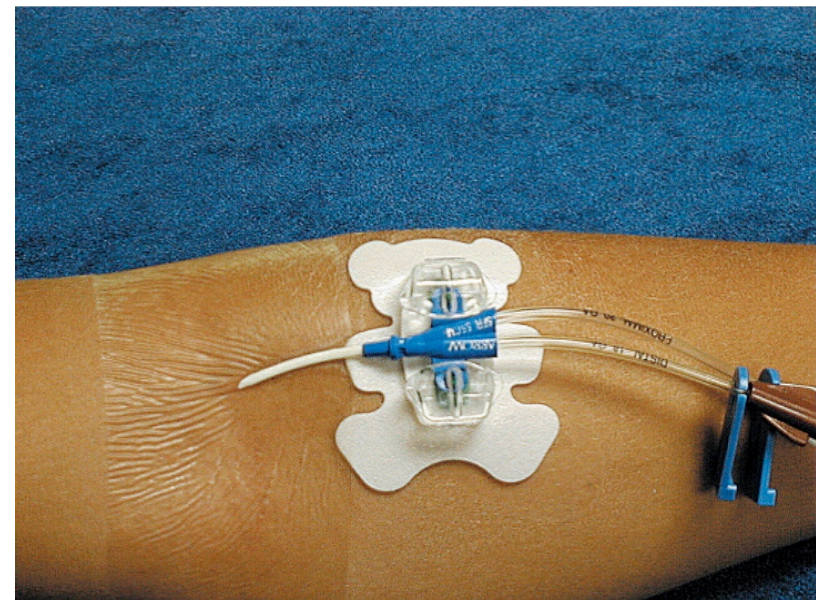

CIANOACRILATO: nella nostra realtà




NOI LO USIAMO IN OGN'IMPIANTO!



CIANOACRILATO: applicazione

- Incisione pulita senza sanguinamento attivo
- Non far entrare in contatto il sangue con la colla
- Tirare dei bordi della ferita per unire i lembi
- Non applicare dentro alla ferite
- Ferite sotto tensione o più lunghe di 3cm vanno trattate anche con punti addizionali sottocute

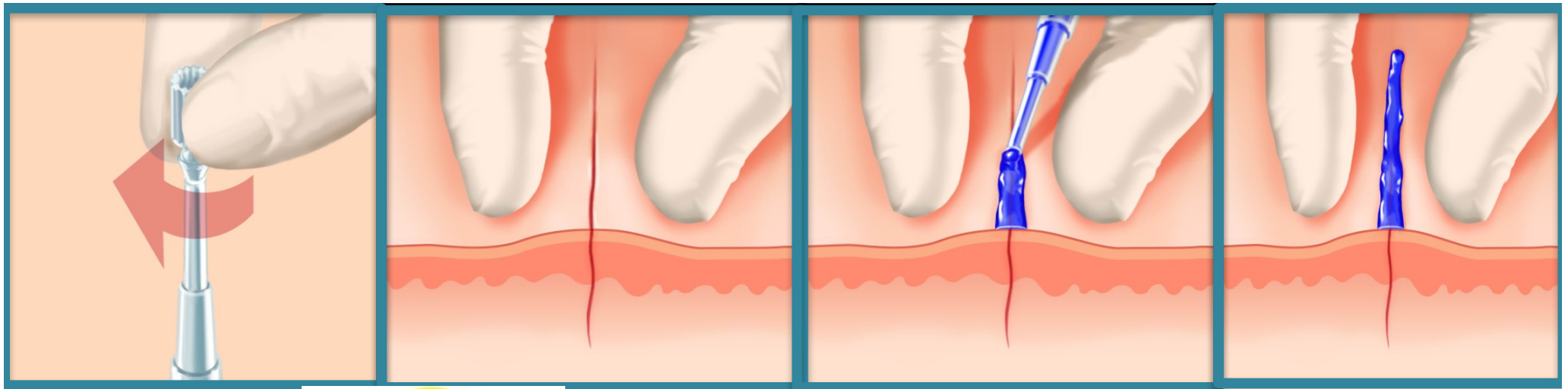

CIANOACRILATO: dopo l'applicazione



- ✓ Crea una “crosticina”
- ✓ Non rimuovere la “crosticina”
- ✓ Coprire comunque con medicazione sterile
- ✓ Non usare medicazione di chlorexidina a lento rilascio mentre ci sia cianoacrillato (siano dischi che gel, anche se per diversi motivi)

CIANOACRILATO: rimozione del catetere

Uguale!! Tira delicatamente di esso fino ad estrarlo completamente!

CIANOACRILLATO: vantaggi

PROFESSIONISTI

- Usato da professionisti sanitari, anche infermieri!
- Veloce applicazione
- Non ha un *knowhow* specifico
- Economico
- Elimina rischio sanguinamento
- Elimina rischio di puntura accidentale
- Non necessita di controlli continui
- Non necessita di rimozione
- Non danneggia il catetere
- Visione diretta del sito d'inserzione


PAZIENTI

- Non provoca dolore
- Comodo e veloce
- Cicatriceestetica
- Non necessita di controlli continui
- Non necessita di rimozione
- Non danneggia la pelle
- Permette un controllo da parte del paziente



CIANOACRILATO

Esiste un'altro prodotto con similar caratteristiche nel mercato?

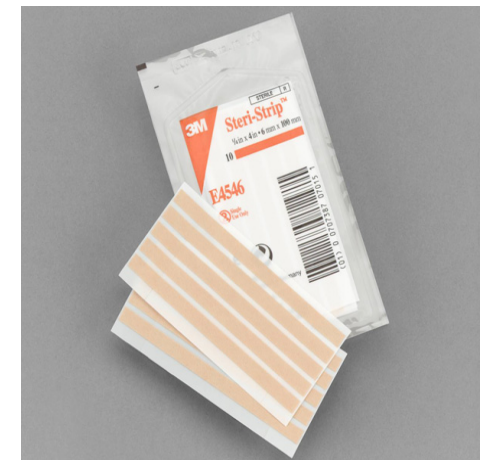



gloria.ortiz@fjd.es

@GruMAV



facebook

